


リモコン 難しい操作がなく、わかりやすいダイレクトリモコン

- 1 入/切**
エアーマッサージの「入/切」の切り替えと、
パイプ動作を「切」にします。
- 2 停止**
全ての動作を停止します。
- 3 脚同時**（※おやすみ前コースは選択できません。）
自動コース時に脚マッサージ（脚カフ）を
追加できます。
- 4 パイプ**
遅・中・速の3段階から
お好みの速さを選択できます。
- 5 電位治療**
体調に合わせて、0.5時間・
3時間・8時間から選択できます。
- 6 ヒーター**
4段階の温度選択と自動コースが
選べます。10時間タイマー付。

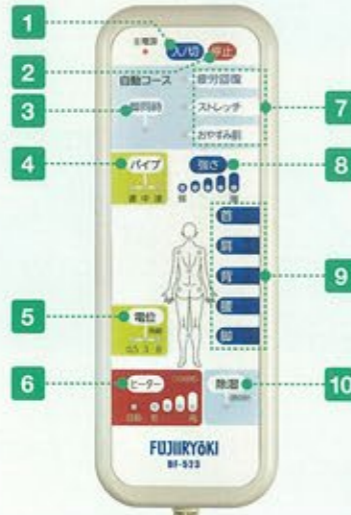

- 7 自動コース**
シーンに合わせて3つのコースから選択できます。
- 8 強さ**
5段階の中から心地よい強さが選択できます。
- 9 部位選択**
首・肩・背・腰・脚の中から好きな部位を
選んでマッサージできます。
- 10 除湿**
蓄積した寝具内の湿気を排出します。80分タイマー付。

●本体寸法(約):幅950×長さ2,000×厚さ80mm
●質量(約):15kg ●電源:AC100V(50/60Hz)
●消費電力:最大123W(電気マッサージ器 62W、
ヒーター 75W、電位治療器 5W)
●コード有効長(約):(電源)2.3m [リモコン]1m
●タイマー時間:[マッサージ]15分 [電位]0.5・3・8時間
[ヒーター]10時間 [除湿]80分
●素材:[本体カバー生地]ポリエステル100% [クッション材]ウレタンフォーム
●JANコード:4951704752329
●医療機器認証番号:225AKBZX00095A01
(電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器、管理医療機器)

脚カフ
●素材:ポリエステル100%
●対応寸法:ふくらはぎ周長約280~430mm

専用シーツ(CF-17SC)
●寸法(約):幅1,050×長さ2,000mm
●素材:ポリエステル100%

[3つ折収納]
ふとん感覚で3つに折りたたむことができ、
押入れにも収納できて場所もとりません。

のびて爽快DX

電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器
組合せエアーマッサージ器 DF-523

メーカー希望小売価格:
333,334円(税抜)
※税抜価格です。



安全に関する
ご注意

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 次の人は、使用しないでください。身体に異常が起こる場合があります。
- 医師からマッサージを禁じられている方
(例)血栓症、重度の動脈硬化、急性静脈炎、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
- 悪性しゅよう(腫瘍)のある方●妊娠中、または出産直後の人●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状[けん(傷) 倦怠、悪寒、血圧変動など]の強い時期、衰弱しているとき)●皮膚に創傷のある方●急性疾患(疼痛性)のある方●骨粗しょう症の方●脊椎骨折の方●捻挫、肉離れなど炎症性の方●知覚障害の方●心臓に障害のある方●温度感覚喪失が認められる方●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医療電気機器を使用している方●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方●貧血症の方●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方●安静を必要とする方●医師の治療を受けている方●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。

ご使用にあたって この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店ですら所定事項を記入のうえ発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。この商品の保証は日本国内でのみ有効です。

お客様相談窓口のご案内 フジ医療器 フリーダイヤル **0120-027-612** 受付:月曜~金曜 午前9時~午後5時30分 ※但し、土日祝日、年末年始は休ませていただきます。

FAX番号 **06-4793-0818** FAX・E-mailでの受付は24時間行っておりますが、お客様へのご連絡はフリーダイヤルの受付時間となります。修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は、まずご購入先にお問い合わせください。

E-mail **http://www.fujiiryoki.co.jp/**

ご相談窓口における 株式会社フジ医療器は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返しお電話させていただく際のため、ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

製品の情報や、楽しいコラムなどが盛りだくさん!!
フジ医療器ホームページ
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

フジ医療器製品の消耗品・別売品のお取寄せはコチラ!!
フジ医療器モール
<http://www.fuji-mall.com/>

フジ医療器商品が当たる!
プレゼントキャンペーン毎月実施中!

ご応募は フジ医療器HPから!
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

QRコード
ケータイからカンタンアクセス

美と健康の総合メーカー
株式会社フジ医療器

〒540-0011 大阪市中央区農人橋1丁目1-22 大江ビル14階
<http://www.fujiiryoki.co.jp/>

このカタログの内容についてのお問い合わせは、右記の販売店にご相談ください。または、フジ医療器お客様相談窓口におたずねください。

●デザイン、仕様は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。●印刷物と実際では多少色味異なる場合があります。あらかじめご了承ください。●本カタログの記載内容は、平成26年2月現在のものです。

●お求めは...
ガス・灯油・木炭・電気 オールエネルギー販売店
三共ネクスト株式会社
〒371-0018 群馬県前橋市三俣町2丁目1-7
TEL:027-231-0718 FAX:027-231-0728

FUJIIRYOKI

電位・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器
組合せエアーマッサージ器 DF-523



全身マッサージで
質のいい眠りをサポート

のびて爽快DX

首から足先まで、全身をやさしくマッサージ 身体が軽くなる“上質な眠り”をお届けします

マッサージ

ストレッチ感覚のマッサージで
全身のコリをほぐします



脚の疲れをほぐす

■ 脚カフ

寝ながら



ふくらはぎから足先をすっぽり覆うブーツタイプ。エアバッグがグウ〜と膨らみスーっとしぼむ圧迫開放動作を繰り返して、脚全体の血行を促進します。

座りながら



脚カフのみでも使用できます。
※本体への接続が必要です。

■ バイブ



ふくらはぎ付近についた2つのバイブで、左右交互に振動をあてて血行を促進します。

首のコリがすっきり



4枚のエアバッグで、首をはさむ、おこす、もみこむ立体的な動きで首すじを効果的にマッサージします。

肩・背・腰の疲れをリフレッシュ

のぼす



ひねる



肩・背・腰の各部位ごとのマッサージと連動してエアバッグが左右バランス良く動き、肩から腰の筋肉をストレッチ感覚でほぐします。

電気マッサージ器 効能・効果


あんま・マッサージの代用
疲労回復、血行促進、筋肉の疲れをとる、筋肉のコリをほぐす、神経痛・筋肉痛の痛みの緩解

寝具環境

毎日心地よく使ってほしいから
より快適な寝具環境を実現しました

冬でもポカポカ ヒーター

自動コース 眠るまでの間と目覚める前に
布団を快適な温度にあたためる自動コース。

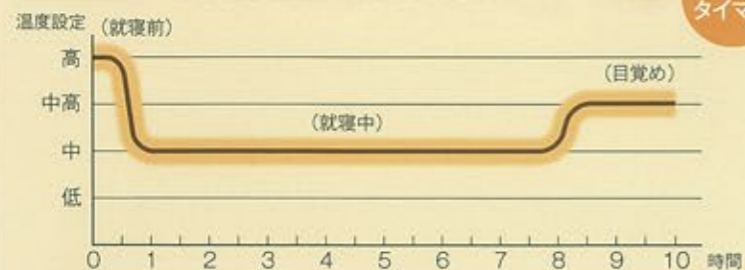

手動選択 お好みの温度を4段階で選べます。
(10時間タイマー)

温度変化イメージ

お手入れカンタン 除湿

布団にたまった湿気を外へ逃がし、
快適な寝具環境を整えます。

※人や布団など物を乗せていない状態で
ご使用ください。

80分
タイマー

寝心地ラクラク 縦横3層クッション構造

硬さの異なるウレタンを使い、身体への負担を軽減します。



1層目……中反発ウレタンを使用し、心地よいフィット感。
2層目……高反発ウレタンを使用し、沈み込みを抑える。
3層目……部位毎に適した硬さのウレタン。

快適性アップ

表生地 制菌・消臭加工

繊維上で臭いを発生させる菌の
増殖を抑制します。

裏生地 Wラッセル生地

クッション性、通気性に優れています。

中生地 首周り消臭加工

トリプルフレッシュプラス
「汗」「たばこ」「加齢臭」「ペット臭」
「ホルムアルデヒド」「アンモニア」
などの生活臭を吸着し、消臭します。

専用シート(CF-17SC) 付属品

汗を素早く吸収する素材「クール・コンフォート」を
採用した肌ざわりのよい専用シートです。

電位治療

肩こりや不眠症などに効果があるマイナス電位を
身体のまわりに発生させます



電位治療イメージ図

電床帯(約600V)

電位治療器 効能・効果 頭痛、肩こり、不眠症及び慢性便秘の緩解

※電位治療とマッサージは、同時使用できません。

マッサージイメージ図